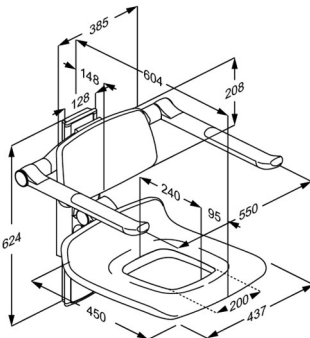




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, manUEllt höjDreglerbar R7435000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777516000 EAN: 5708590359823 HMI: 124338 FDA: INN/D135865  PLUS duschsits 450 med hål, uppfällbart, med rygg- och armstöd. HöjDreglerbart 195 mm, utan andvÄning av verktyg. Uppfällbara armstöd kan höjDregleras oberoende av sits och ryggstöd. Antracit täckplatta på lodrÄt vÄggskena. Exkl. monteringskruv för vÄgg. <i>ErsÄtter R7431</i> PLUS duschsits 450 med hål, uppfällbart, med rygg- och armstöd. HöjDreglerbart 195 mm, utan andvÄning av verktyg. Uppfällbara armstöd kan höjDregleras oberoende av sits och ryggstöd. Antracit täckplatta på lodrÄt vÄggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med trÄkÄrna, monterade pÄ aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvÄkomponentsplast Är tÄlig och lÄtt att rengöra. Exkl. monteringskruv för vÄgg. <i>ErsÄtter R7431</i>
Justerbar HöjDjustering Produktkapacitet	HöjDreglerbar 175 mm Max brukarvikt (sits): 200 kg Max belastning armstödd: 55 kg När duschsitsen belastas med 200 kg, belastas varje fÄstskruv med 24 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med sÄkerhetsfaktor 1,5. Detta Är i enlighet med kraven i gÄllande standarder hjÄlpmedlet.</i>
Material Ergonomi	DuschsÄtet Är framstÄllt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som Är gjutet runt en plywoodkÄrna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna pÄ ryggstödet och sÄtet Är förseglade med Ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - sÄte 450 x 437 mm. Sitsen Är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig kÄnns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort.



PRESSALIT®

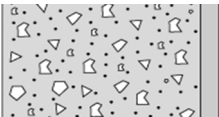
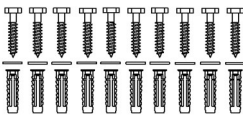
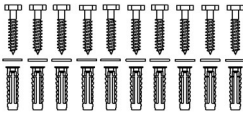
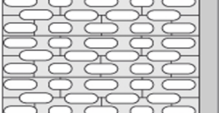
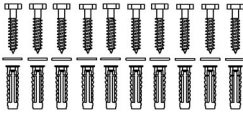
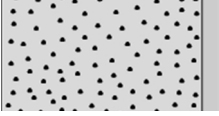
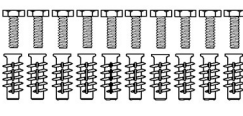
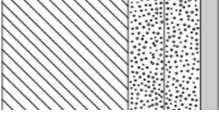
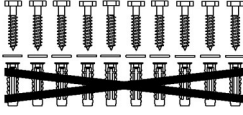
Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjddreglerbar R7435000
Funktioner	Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjddregleras oberoende av sits och ryggstöd.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Diese Produkt gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, zuletzt geändert durch die Erfüllung der Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007, produziert worden ist. Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



PRESSALIT®

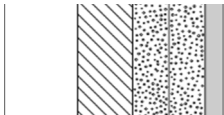
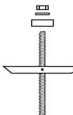
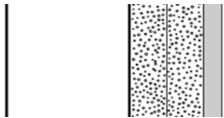
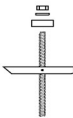
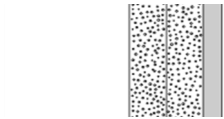
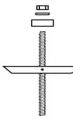
Product	PLUS duschsits 450 med hål, manUEllt höjDreglerbar
Varunummer	R7435000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8662 - Monteringsset, 10 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjdreglerbar R7435000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®