




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjd- och sido reglerbar R7455000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777516400 EAN: 5708590359946 HMI: 124242 FDA: INN/D135865  PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS duschsits 450 med hål, uppfällbart, med ryggstöd. Höjddreglerbart 380 mm och sidoreglerbart, utan användning av verktyg. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej). <i>Ersätter R7441</i>
Justerbar Höjjustering Produktkapacitet	Höjd- och sidoreglerbar 380 mm Max brukarvikt: 200 kg När duschsitsen belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Sits kan fällas upp mot väggen efter användning.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

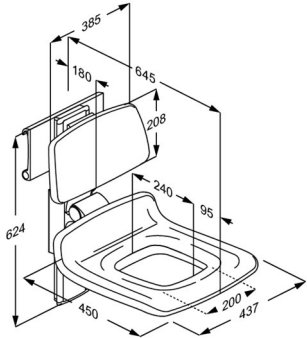

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjd- och sido reglerbar R7455000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®