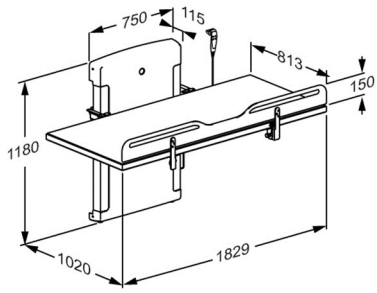




PRESSALIT®

Product Varunummer	CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar R8584572000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777541100 EAN: 5708590358130 HMI: 125834  Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbart. Elektrisk höjdreglerbart 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med tryckknappar i framkant. Inkl. sänggrind, kroppsbälte och manöverdosa. Liggyta 813 x 1 829 mm av kompakt laminat. Utvändiga mått 1 020 mm x 1 829 mm. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	700 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 200 kg. Vid 200 kg maxbelastning på vårdbritsen, belastas varje skruv med 33 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 500 kg, enligt kraven i de använda hjälpstandarderna.</i>
Hastighet	Hastighet upp: 15 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s
Ljudnivå	48 dB



PRESSALIT®

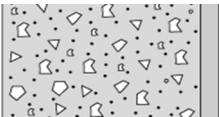
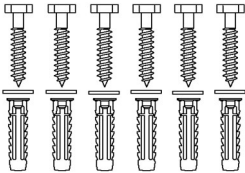
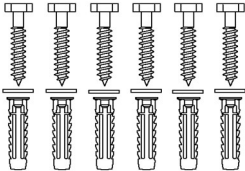
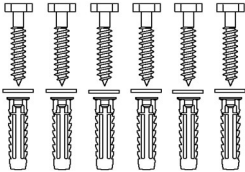
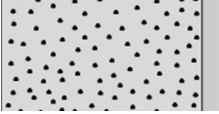
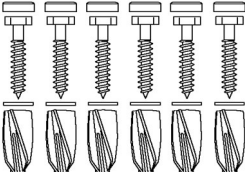
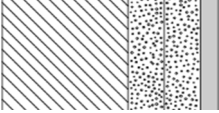
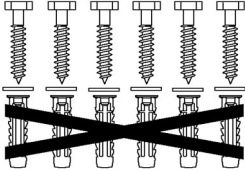
Product Varunummer	CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjddreglerbar R8584572000
Ergonomi	Den ergonomiskt utformade sänggrind har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare. Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.
Anslutnings ström (V)	230
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 70 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.
Överensstämmelses deklARATION	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av maskindirektivet 2006/42/EEG och av RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

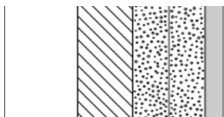
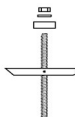
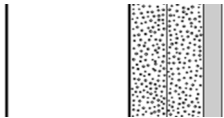
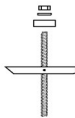
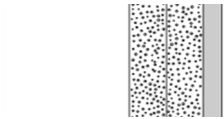
Product	CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdglerbar
Varunummer	R8584572000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	CT 4000 vårdbräns, manuell uppfällbar, elektrisk höjdglerbar R8584572000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®