



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS väggskena, 600 mm R9806112
Färg	VVS:615841106 NRF:7501013 EAN:5708590305738 HMI: 71739 Antracitgrå
Beskrivning	 PLUS väggskenan används för upphängning av toalettarmstöd, duschsits och tvättställ, vilket möjliggör sidoförflyttning av dessa produkter. Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan. PLUS väggskena, 600 mm, för vågrät montering. Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar. Material: Aluminium och polystyren plast. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal belastning: Tål - beroende på väggens kvalitet - en vertikal belastning på upp till 1 000 kg.
Ergonomi Funktioner	Den vågräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna sidledes. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov. Skenan fördelar vikten på den enskilda badrumsprodukten över hela skenans längd. Produkterna kan låsas fast vid skenan, med intuitiva justerings- och låsfunktioner. Frontplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

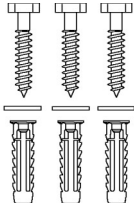
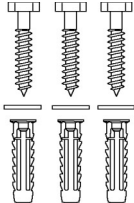
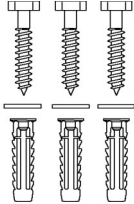
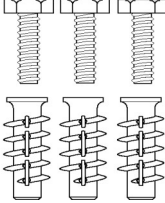
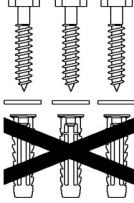
Product	PLUS väggskena, 600 mm
Varunummer	R9806112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt oppfyller alle relevante krav av Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter i risk klass I. Denne produkt er tillbehör till en medicinteknisk produkt, da den i sig inte er en medicinteknisk produkt, men som er avsedd att användas tillsammans med flere bestemte medicintekniska produkter for å særskilt möjliggjøre anvendningen av de medicintekniska produktene for deres avsedde ändamål. Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3352/0/Pdf Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras



PRESSALIT®

Product	PLUS väggskena, 600 mm
Varunummer	R9806112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H1z12 V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8670 - Monteringsset, 3 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8620 - Monteringsset, 6 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product	PLUS väggskena, 600 mm
Varunummer	R9806112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®