



Molift Quick Raiser 2

Lyften som imiterar kroppens naturliga rörelsekurva



Molift Quick Raiser 2

Molift Quick Raiser 2 är den optimala lyften för förflyttningar från sittande till sittande och sittande till stående hos brukare som själva kan hjälpa till under lyftet.

Den snedställda masten ger en naturlig rörelsekurva vilket uppskattas av både vårdare och brukare. Lyftet sker snabbt, tryggt samt bekvämt och är perfekt för toalettsituationer. Quick Raiser 2 tilldelades det norska designpriset för banbrytande design och funktionalitet. Till Quick Raiser 2 används Molift RgoSling StandUp lyftsele som är snabb och enkel att applicera.

Lättmanövrerad i trånga utrymmen

Molift Quick Raiser 2 roterar runt sin egen axel, den passar därför utmärkt i trånga utrymmen. Den är liten, kompakt och robust, har lågt chassi och elektrisk benbreddning. Det låga chassit gör att den kommer in under låga rullstolar, sängar och stolar. Hjulens placering och den snäva svängraden gör den lättmanövrerad, även i trånga utrymmen. Molifts miljövänliga batteri svarar för en säker drift.

Automatisk servicevarning

Molift Quick Raiser 2 är utrustad med Molift service tool. Detta är en inbyggd programvara som räknar ut när lyften behöver service utöver den rekommenderade årliga kontrollen. Molift Service tool säkerställer att lyften alltid fungerar optimalt. Det finns även möjlighet att hämta ut statistik som visar lyftens användningsmönster.

**Benämning**

Quick Raiser 2
Quick Raiser 2+

Art.nr

M23020
M23025

Batteri

NiMH 14,4 V - 2,6 Ah

Laddningstid batteri Ca 3 timmar

Lyfthastighet

Quick Raiser 2: 5 cm/sek med 75 kg
Quick Raiser 2+: 2,8 cm/sek med 75 kg

Antal lyft Ca 40 lyft med 75 kg i 50 cm

Underhåll

Quick Raiser 2



Quick Raiser 2+



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.

Unika egenskaper



Unik hjulposition

Den lätta konstruktionen i kombination med den unika hjulpositionen bidrar till att Molift Quick Raiser är otroligt lätt att manövrera.



Vändbara underbensstöd

Underbensstöden är justerbara i höjdled och kan vändas för bättre passform och ge ett alternativt stöd för underbenen.



Batteri-indikator

Batteri-indikator på handkontrollen som indikerar när laddning behöver ske.



Säkerhet

Flera olika säkerhetsdetaljer är standard, som nödstopp, överbelastningsskydd, elektrisk och mekanisk nödsänkning.



Energispar-funktion

Elektroniken har en energispar-funktion som gör att systemet sätts i viloläge efter en period utan aktivitet.



Miljövänliga batterier

Quick Raiser är utrustad med miljövänliga NiMH batterier.

Tillbehör



Justerbar fotplatta

Höjjusterbar fotplatta, idealisk till barn eller korta vuxna. Max brukarvikt: 75 kg
Art.nr 0451000




Sandaler

Sandalerna används för att säkerställa att fötterna hålls på plats under lyftet.
Sandaler Small art.nr 0452100
Sandaler Medium art.nr 0452200
Sandaler Large art.nr 0452300



Extra mjuk polstring för underbensstöd

För brukare med extra känsliga underben.
Polstring Small art.nr 0455111

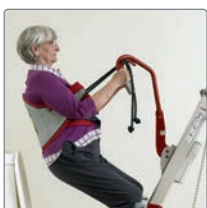

Molift RgoSling StandUp lyftsele

Ett sortiment av lyftselar för användning med Molift Quick Raiser med eller utan extra stöd. Läs mer på www.etac.se/lyftselar



Passar bra i trånga utrymmen.



Lågt chassi och elektrisk benbreddning gör det enkelt att komma intill.

”Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter